


ピンクリボン

10月は乳がん啓発月間

新しい健康習慣を。 女性の9人に1人が罹患 「乳がん」のリスク

乳がん10年生存率 (2012年登録)

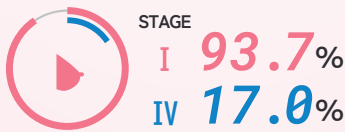

出典：国立がん研究センターがん情報サービス
「院内がん登録生存率集計」


乳がん死亡者数（女性のみ） (2024年)



※2024年の女性のがん死亡者数162,325人のうち乳がんで死亡した人の割合
出典：国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」（厚生労働省人口動態統計）



初潮が早い、出産歴がないなど、女性ホルモンの分泌期間が長いこともリスクになります。
断酒、禁煙、運動不足改善などの対策も効果的です。

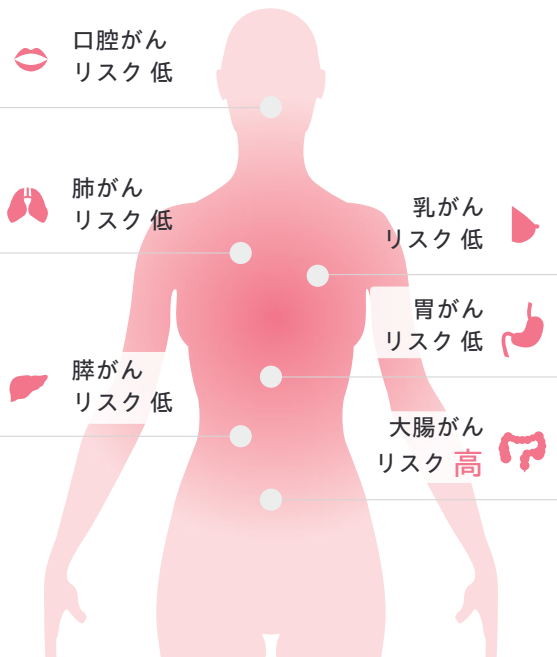

だ液を採取、ポストへ投函。

6 種のがんリスクを評価。 乳がんも早期ステージから

乳がん、こんな人は特に注意 /

- ☐ 初潮年齢が早い
- ☐ 家族に乳がんの病歴がある
- ☐ 閉経後の肥満

患者数が多いですが、10年生存率がほかのがんに比べて高いです。
早く治療に取り組めば、乳房も温存でき、かなりの確率で“治る”
に近い状況にもっていけます。

発見のための検査

- マンモグラフィ（乳房X線検査）
乳房のX線撮影で、微小なしこりや石灰化を見つける検査
- 乳腺超音波（エコー）検査
超音波で画像化し、高濃度乳房でもしこりを見つけやすい無痛の検査

影響範囲と診断の確定


- 細胞診・組織診（生検）
針で直接組織を採取し、顕微鏡でがんの確定診断を行う検査
- 乳房MRI検査
磁気で内部を調べ、術前にがんの広がり詳細を確認する検査

がんは待ってくれない がんの進行スピード例

がんは進行すると成長が速くなるため、早期発見が極めて重要です。
そのため、生活習慣の改善や検診の活用を通じて、がん化するリスクがある段階から適切に管理することが大切です。

← 発見が難しい（5～20年） → ← 検査で発見可能 →

早期ステージは僅か半年～2年程度

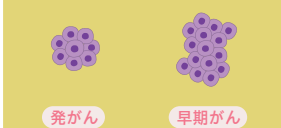

がんは早期発見が大切

SalivaChecker®とは

Q どうしてだ液から
がんのリスクがわかるの？ ▶▶▶

画像診断可能

スクリーニング検査


自己免疫

A がんにかかると、だ液中の代謝物に変化するから

だ液は「身体の鏡」といわれ、血液や尿と同じように健康状態の指標となる多くの情報を含みます。

これまでの研究から、がんに罹ることで、ポリアミンをはじめとしただ液中に含まれる代謝物の特徴が変化することが分かっています。

サリバチェッカーでは AI（学習モデル）を用い、測定だ液中の代謝物の特徴が、がんの方とがんではない方のどちらに近いかを解析することで、がんのリスクを評価します。

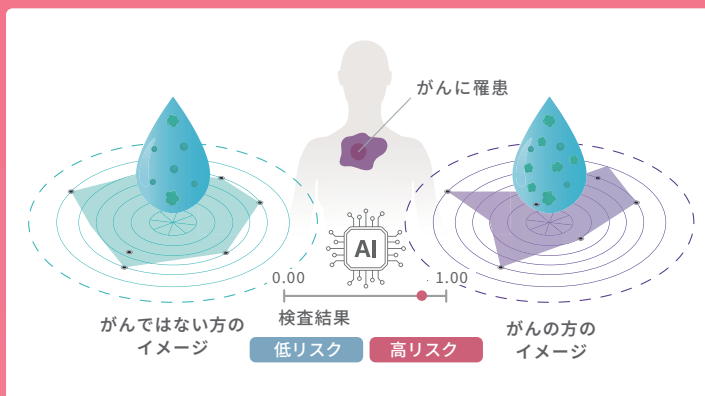

研究に裏打ちされた、確かな信頼を



慶應義塾大学先端生命科学研究所の研究と臨床データに基づき開発。消化器外科医の代表の想いと科学的根拠のあるリスク評価です。

手間がなく、身体への負担が少ない

1
だ液を採取

2
ポストへ投函

3
検査結果

検査手順のご紹介

お申込概要

全国消防協会会員（消防職員）の皆様へ

検査料

公式サイトで
お申し込みの場合

~~26,400~~

円（税込）

特別
価格

16,500

円（税込）

お申し込みは
こちらから



申込方法

右のQR コードまたは下記URLよりお申し込みください。

<https://www.salivachecker.com/?campaigncd=85zenshou3>

採取キット提出期限：キット発送から 3 ヶ月

※期限内にご提出いただけない場合は、検査結果をお返すことができません。

＜注意事項＞

- 1) 本検査は遺伝子検査のように将来的な罹患リスクを調べるものではなく、今現在、がん罹患している可能性を調べる検査です。また、本検査により得られる情報は医師の診断に代わるものではありません。
- 2) 本検査は次に当てはまる方はリスク評価結果が影響を受ける可能性があります。
 - 妊娠中・授乳中の方 ●発熱など炎症に伴う症状がある方 ●自己免疫性疾患（潰瘍性大腸炎・リウマチ等）を有する方
 - ドライマウス・シェーグレン症候群の方 ●検査前の注意事項を守れていない方
 - がん治療中（手術・抗がん剤治療・放射線治療）の方、その他疾患による手術を受けた方
- 3) だ液採取前日から食事等の制限があります。
- 4) 本検査結果のリスク評価結果にかかわらず身体に何らかの自覚症状がある場合は速やかに医療機関を受診ください。

検査キット開発元／検査・測定機関

SalivaTech 株式会社サリバテック 住所／山形県鶴岡市覚岸寺字水上 246 番地 2

商品トラブル、不具合の場合

検査キットに瑕疵がある場合、弊社負担で交換を承ります。また、お客様都合による返品はお受けできません。

その他
注意事項

- 海外発送は行っておりません。●一部の離島はサービス対象外となります。●時間指定はできません。
- 弊社より発送前に限り、検査のキャンセルが可能です。サリバテックのホームページよりご連絡ください。●宅配ボックス完備のマンション・アパートにお住まいの際は、宅配ボックスにお届けさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。

お問い合わせ

